

INTERmedic

info@inter-medic.net
www.inter-medic.net

PHOTONIUS™

Intense Pulse Light**Sistema de Luz
Pulsada Intensa**

- Seguridad
- Eficacia
- Rapidez

Fotodepilación
INTERMEDIC PHOTONIUS™

**Otras fototerapias
con INTERMEDIC PHOTONIUS™**

- Fotorejuvenecimiento facial
- Terapias del acné
- Tratamientos vasculares faciales

Aesthetics


INTERmedic

Centro:



Eliminación del
pelo no deseado

Fotodepilación
INTERMEDIC PHOTONIUS™

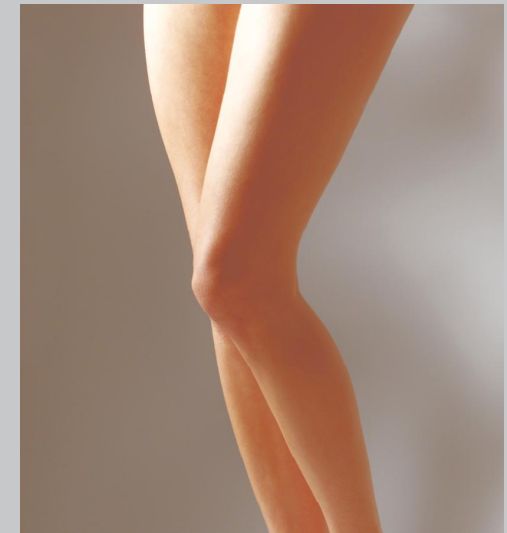

La información expuesta es de carácter general. Para tu caso específico, consulta con tu especialista.

Encuentro con la perfección natural

INTERMEDIC PHOTONIUS™

La fotodepilación mediante la luz pulsada PHOTONIUS™ llega para sustituir otros métodos de depilación existentes. Es rápido, seguro, cómodo y sobre todo eficaz.

Se acabaron las agujas, ceras o cremas, PHOTONIUS™ consigue la reducción del pelo no deseado, de forma rápida, tanto en hombres como en mujeres, y en cualquier parte del cuerpo.

¿Qué es PHOTONIUS™ y en qué se basa la luz pulsada?

La luz pulsada es una emisión de luz que incluye todas las longitudes de onda. La luz generada por una lámpara de PHOTONIUS™ es absorbida por la melanina contenida en el pelo y convertida en calor. Este calor intenso es conducido a través del pelo hasta el folículo, que es así destruido e incapacitado para regenerar nuevo pelo.

¿Es seguro, eficaz y cómodo?

INTERmedic PHOTONIUS™ posee un eficaz sistema de filtros que limitan las longitudes de onda de acuerdo al tratamiento. Los filtros, intercambiables según el fototipo de la piel, permiten trabajar a

altas fluencias por centímetro cuadrado, sinónimo de eficacia en la fotodepilación.

La moderna tecnología aplicada en el desarrollo de PHOTONIUS™ hace que ya no sea necesaria la utilización de geles para obtener los mejores resultados, lo que incrementa la comodidad de los pacientes.

¿Cuánto tarda y cuántas sesiones son necesarias?

Los tratamientos son rápidos, unas piernas o la espalda pueden ser tratadas en menos de una hora. Áreas más pequeñas como la cara o boca pueden tardar unos cuantos minutos.

Hay dos factores principales que inciden en la durabilidad del tratamiento. Por un lado, el color de la piel (fototipo), el del pelo, y el grosor del mismo. Está ampliamente comprobado, que los mejores resultados se consiguen en pieles claras con pelos oscuros.

Por otro lado, la fase de crecimiento del pelo. Sólo se eliminan en cada sesión aquellos pelos que están en fase de crecimiento (anágena), por lo que se requieren varias sesiones para conseguir el efecto de reducción o disminución del pelo.

Una vez conseguido ese resultado, se necesitarán unas sesiones al año como recordatorio o mantenimiento.

¿Qué precauciones han de tomarse antes y después del tratamiento?

Es importante que el paciente no haya realizado ningún tratamiento de electrólisis, cera o similar en las cuatro semanas anteriores al tratamiento.

Asimismo, apesar de que PHOTONIUS™ incluye un cabezal específico para depilar pieles oscuras, el paciente no debe tomar el sol (ni natural ni artificial) en ese período, para evitar la activación de la melanina cutánea.

Los resultados en pieles hidratadas son siempre superiores a los obtenidos en pieles secas y deshidratadas.

Después del tratamiento, el paciente deberá utilizar cremas de protección solar, como mínimo de factor SPF 30, en las zonas depiladas expuestas al sol.